

SONICSTIM

Caratteristiche dei programmi memorizzati

PROGRAMMA	FREQUENZA	IMPULSO
Combinato 1	35 Hz	200 µs
Combinato 2	70 Hz	50÷200 µs
Combinato 3	80 Hz	200 µs
Combinato 4	100 Hz	175 µs
Combinato 5	2÷100 Hz	250 µs
Combinato 6	2÷110 Hz	175 µs
Combinato 7	150 Hz	50÷200 µs
Ultrasuono	1 MHz	Continuo
Elettroterapia 1	35 Hz	200 µs
Elettroterapia 2	70 Hz	50÷200 µs
Elettroterapia 3	80 Hz	200 µs
Elettroterapia 4	100 Hz	175 µs
Elettroterapia 5	2÷100 Hz	250 µs
Elettroterapia 6	2÷110 Hz	175 µs
Elettroterapia 7	150 Hz	50÷200 µs

PUNTI DI TRATTAMENTO PER TERAPIA CON ULTRASUONO (in rosso la zona del dolore, in blu i punti da trattare con la testina dell'ultrasuono)




Muscolo sub occipitale
Muscolo trapezio
Muscolo temporale
Muscolo sternocleidomastoideo



Muscolo trapezio




Muscolo sternocleidomastoideo

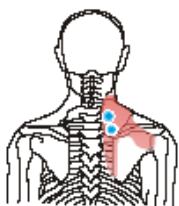

Muscolo elevatore
delle scapole



Muscolo trapezio

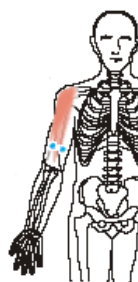


Bicipite





Flessore radiale
Muscolo del polso



Flessore dell'ulna

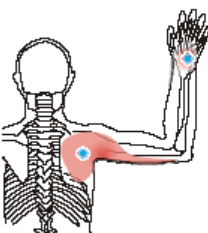

Muscolo sub scapolare

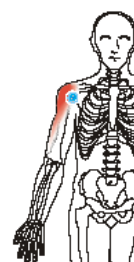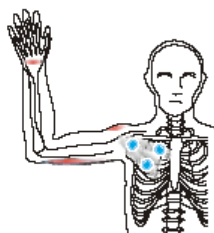

Muscolo deltoide



Muscolo tibiale anteriore





Retto femorale



Muscolo gastrocnemio

Muscolo soleo

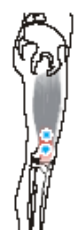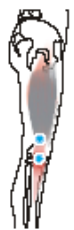

Vasto laterale



Vasto mediale



Gluteo

INDICAZIONI DI TRATTAMENTO E POSIZIONE ELETTRODI PER TRATTAMENTO ELETTROTHERAPIA E COMBINATO ULTRASUONO/ELETTROTHERAPIA

Trattamento e posizione elettrodi	Programma
Mal di testa, fig. 1 Dolori facciali, fig. 2 Mononeuropatia, fig. 11 Dolore muscolare, fig. 6,7 Rizopatia cervicale, fig. 5 Neuralgia, fig. 15 Sciatica, fig. 19 Dolore al ginocchio, fig. 23	TENS Burst (E1/C1 e E4/C4)
Dolore al trapezio, fig. 12,25 Lombalgia, fig. 13,14 Dolore alla coscia, fig. 21,26	TENS modulata (E2/C2, E5/C5, E6/C6 e E7/C7)
Cervicali, fig. 3 Dolore alla spalla, fig. 4 Dolore al gomito, fig. 8 Dolori reumatici, fig. 10 Dolori intercostali, fig. 16 Lombalgia, fig. 13,14 Dolori mestruali, fig. 17 Dolore da arto fantasma, fig. 18 Dolore all'anca, fig. 20 Dolori osteoartritici nel ginocchio, fig. 22, 23 Ferite in via di guarigione, fig. 24	TENS convenzionale (E3/C3)

**POSIZIONI ELETTRODI TRATTAMENTO
ELETTROTERAPIA**

**POSIZIONE ELETTRODO E PUNTI DI
TRATTAMENTO TERAPIA COMBINATA
ULTRASUONO/ELETTROTERAPIA**

(in blu sono riportati i punti da trattare
direttamente con la testina dell'ultrasuono)

